



BABYHR Mounting Instructions for 522KL/522KG



PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
© Pelstar, LLC 2018

www.homscales.com

weigh**easier**®

Health o meter®


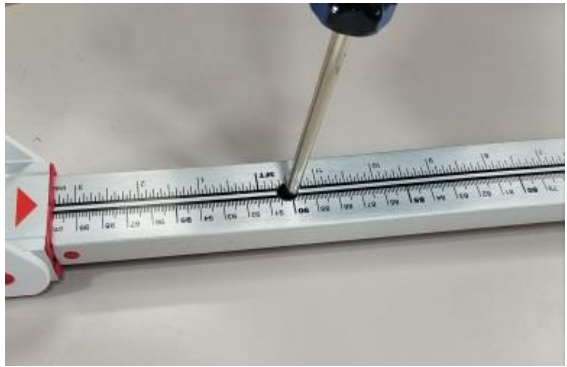
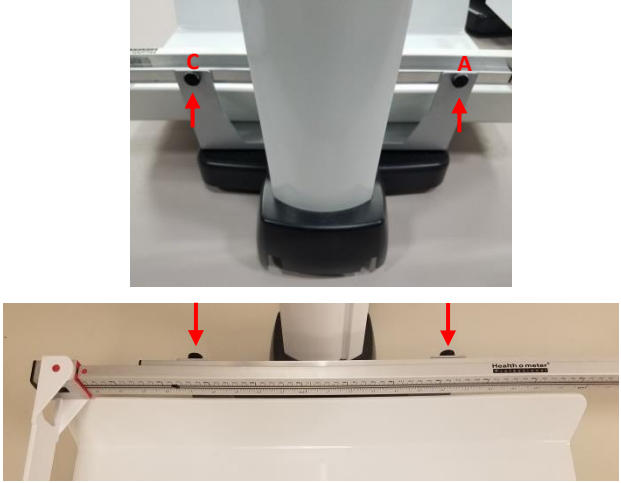

P r o f e s s i o n a l

Thank you for purchasing this Health o meter® Professional product. Please read these instructions carefully and keep it for easy reference or training.

Notes:

- If mounting the height rod onto a scale with the weighing tray already attached start at step 1.
- If mounting the height rod on a brand new scale, do not attach the weighing tray during scale assembly. Begin height rod mounting at step 2 below.
- Ensure that the scale is off during the height rod mounting process. If the scale was powered on during the process, be sure to turn the scale off and power on again before weighing the first patient.
- If the height rod needs to be removed, ensure the scale is off before removal and off before replacing the height rod onto the scale.

<p>1. Remove the screw cover caps on the weighing tray. Next, using a screwdriver, remove the two screws to detach the weighing tray from the scale platform. Retain the screws and caps for use in step 3.</p>	
<p>2. Obtain the mounting bracket and align the holes in the bracket with the holes in the scale platform, as shown.</p>	
<p>3. Obtain the weighing tray and align the holes in the tray with the holes in the platform and mounting bracket. Obtain the two weighing tray screws included with your scale or that were removed in step 1. Insert the screws through the weighing tray and mounting bracket and into the scale platform. Using a screwdriver, attach the weighing tray to the scale platform. Obtain the screw cover caps included with your scale or removed in step 1. Replace the caps over the screws on the tray.</p>	
<p>4. Obtain the silver support rod from the packaging. Lay the support rod on a flat surface with the side with four holes facing up. Place the end with the most holes on the left side.</p>	

<p>5. Flip the support rod over so the side with the four holes is facing down. Ensure that the end of the support rod with the most holes remains on the left side.</p>	
<p>6. Place the BABYHR onto the support rod aligning the two holes at each end. Ensure the end of the height rod with the measuring starting point is on the left side. Obtain the two flat head screws from the packaging and insert them through the height rod into the support rod. Tighten completely using a Phillips head screwdriver. A magnetic screwdriver is recommended.</p> <p>Note: The packaging includes an extra flat head screw. Only two screws are needed.</p>	
<p>7. Align the support rod with height rod onto the mounting bracket on the scale. Ensure that the starting point of the height rod is flush with the side of the scale. Obtain the two thumb screws from the packaging. Insert the thumb screws through holes A and C on the support rod and into the mounting bracket. Completely hand tighten.</p>	
<p>8. Ensure that the stationary paddle of the height rod is flush with the left side of the weighing tray. Mounting is now complete.</p>	

WARRANTY

Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter[®] Professional product is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the product at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC
Attention R/A# _____
Return Department
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525



PELSTAR, LLC
9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR PRODUCT FOR WARRANTY COVERAGE AT:
www.homscases.com

Health o meter[®] is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter[®] Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar, LLC. We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter[®] Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar, LLC 2018



Instrucciones de montaje del estadímetro BABYHR para la báscula 522KL/522KG



PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

www.homscales.com

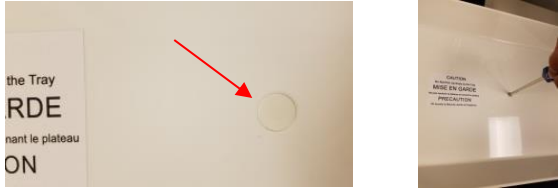

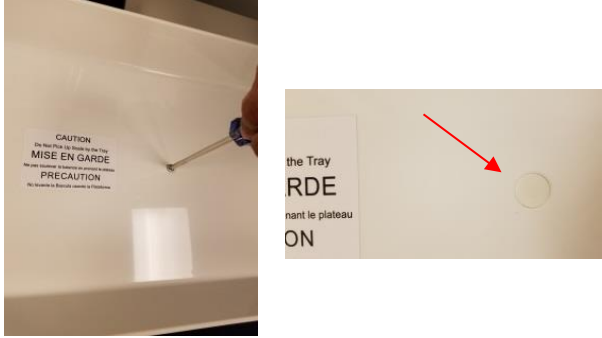
© Pelstar, LLC 2018

weigh**easier**®

Gracias por comprar este producto de Health o meter® Professional. Le pedimos leer detenidamente las instrucciones y conservarlas para fines de consulta o capacitación.

Notas:

- Para montar el estadímetro a una báscula con la bandeja de pesaje ya instalada, inicie en el paso 1.
- Para montar el estadímetro a una bascula nueva, no instale la bandeja de pesaje durante el armado de la báscula. Inicie el montaje del estadímetro en el paso 2.
- Asegúrese de que la báscula esté apagada durante el proceso de montaje del estadímetro. Si la báscula se encontraba encendida durante el proceso, asegúrese de apagarla y encenderla nuevamente antes de pesar al primer paciente.
- Para remover el estadímetro, asegúrese de apagar la báscula antes de removerlo y antes de colocarlo nuevamente en la báscula.

<p>1. Remueva las tapas de los tornillos en la bandeja de pesaje. A continuación, usando un desarmador, remueva los dos tornillos para separar la bandeja de pesaje de la plataforma de la báscula. Conserve los tornillos y tapas para usarlos en el paso 3.</p>	
<p>2. Tome el soporte de montaje y alinee los agujeros del soporte con los agujeros de la plataforma de la báscula, como se muestra en la imagen.</p>	
<p>3. Tome la bandeja de pesaje y alinee los agujeros de la bandeja con los agujeros de la plataforma y el soporte de montaje. Tome los dos tornillos de la bandeja de pesaje incluidos con su báscula o que fueron removidos en el paso 1. Inserte los tornillos a través de la bandeja de pesaje y el soporte de montaje hacia adentro de la plataforma. Usando un desarmador, instale la bandeja de pesaje a la plataforma de la báscula. Tome las tapas de tornillos incluidas con su báscula y que fueron removidos en el paso 1. Vuelva a colocar las tapas de los tornillos en la bandeja.</p>	

<p>4. Tome la barra de soporte plateada del empaque. Coloque la barra de soporte sobre una superficie plana de costado con cuatro agujeros mirando hacia arriba. Coloque el extremo con más agujeros en el lado izquierdo.</p>	
<p>5. Voltee la barra de soporte de manera que el lado con cuatro agujeros mire hacia abajo. Asegúrese de que el extremo de la barra de soporte con más agujeros permanezca del lado izquierdo.</p>	
<p>6. Coloque el estadímetro BABYHR en la barra de soporte, alineando los dos agujeros en cada extremo. Asegúrese de que el extremo del estadímetro con el punto de comienzo de la medición se encuentre del lado izquierdo. Tome dos tornillos de cara plana del empaque e insértelos a través del estadímetro hacia adentro de la barra de soporte. Apriételos completamente usando un desarmador Phillips. Se recomienda usar un desarmador magnético.</p> <p>Note: El empaque incluye un tornillo de cara plana extra. Únicamente se requieren dos tornillos.</p>	
<p>7. Alinee la barra de soporte con el estadímetro en el soporte de montaje y en la báscula. Asegúrese de que el punto inicial del estadímetro quede enrasado con el lado de la báscula. Tome los dos tornillos de pulgar del empaque. Inserte los tornillos de pulgar a través de los agujeros A y C en la barra de soporte y hacia adentro del soporte de montaje. Apriételos completamente con su mano.</p>	
<p>8. Asegúrese de que la paleta fija del estadímetro quede enrasada con el lado izquierdo de la bandeja de pesaje. Ha concluido el montaje.</p>	

GARANTÍA

Garantía limitada

¿Qué cubre la garantía?

Esta báscula Health o meter® Professional cuenta con una garantía contra defectos de materiales o fabricación por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra. En caso de que el producto muestre defectos en su funcionamiento, puede devolverlo, con flete prepago y empacado adecuadamente, a Pelstar, LLC (consulte las instrucciones en la sección de: "Para obtener el Servicio de Garantía"). En caso de que el fabricante determine que existe un defecto de material o fabricación, el único recurso del cliente será el reemplazo de la báscula sin cargo adicional. El reemplazo se realiza a través de un producto o componente nuevo o refabricado. En caso de que el producto ya no se encuentre disponible, se podrá reemplazar el mismo con un producto similar de igual o mayor valor. Todas las piezas reemplazadas están cubiertas únicamente por el período de garantía original.

¿Quién está cubierto?

El comprador original del producto debe contar con un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Le solicitamos conservar su factura o recibo. Los vendedores o tiendas al público de Pelstar que venden productos de Pelstar no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué está excluido?

Su garantía no cubre el desgaste normal de las piezas o daños resultantes de cualquiera de lo siguiente: uso negligente o indebido del producto, uso en voltaje o corriente inadecuados, uso contrario a las instrucciones de operación, abuso, incluyendo manipulación, daño en transporte o reparación no autorizada o alternancias. Adicionalmente, la garantía no cubre desastres naturales, como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede además tener otros derechos que varían de un país a otro, de un estado a otro, de una provincia a otra o de una jurisdicción a otra.

Para tener el derecho al servicio de garantía, asegúrese de conservar su recibo o comprobante de compra. Llame al número (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600 para recibir una clave de autorización de devolución (RA), la cual deberá incluir en la etiqueta de devolución. Adjunte su comprobante de compra al producto defectuoso, junto con su nombre, domicilio, número telefónico y la descripción del problema. Empaque cuidadosamente el producto y envíelo con envío y seguro prepago a:

Pelstar, LLC

Attention R/A# _____

Return Department
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525



PELSTAR, LLC

**9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600**

POR FAVOR REGISTRE SU BÁSCULA PARA LA COBERTURA DE GARANTÍA EN:
www.homsscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usado bajo licencia. Los productos profesionales Health o meter® Professional son fabricados, diseñados y propiedad de Pelstar, LLC. Nos reservamos el derecho de mejorar, aumentar o modificar las características o especificaciones del producto Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2018