

Health o meter[®]
P r o f e s s i o n a l

Models 844KL / 844KL-USB Digital Floor Scale



ISO 9001:2015
CERTIFIED

ISO13485:2016
CERTIFIED

User Instructions



PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

www.homscales.com

weigh**easier**[®]

Thank you for your purchase of this Health o meter® Professional product. Please read this manual carefully, and keep it for easy reference or training.

TABLE OF CONTENTS

Cautions and Warnings.....	3
Specifications	3
Certifications	3
Service	3
Set-up Instructions	4
Operating Instructions	5
Troubleshooting	6
Maintenance & Cleaning	6
Warranty.....	7

Note: This scale has been factory calibrated and cannot be calibrated by the user.

Please register your scale for warranty coverage at:

www.homscales.com

For User Instructions updates and revisions please go to:

www.homscales.com

CAUTIONS AND WARNINGS / SPECIFICATIONS / CERTIFICATIONS / SERVICE

Cautions and Warnings

To prevent injury and damage to your scale, please follow these instructions very carefully.

- Do not transport the scale with anything on the platform.
- For accurate weighing, the scale must be placed on a flat, stable surface.
- For accurate weighing, verify proper operation according to the procedure described in this manual before each use.
- Do not use in the presence of flammable materials.



In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be liable for damages or injuries arising from or connected with the assembly, use, or misuse of its products.

Specifications

This digital floor scale displays weight in pounds, kilograms or stones. It also features a weight hold that allows the weight measurement to stay displayed for 5 seconds after stepping off scale. Each precision scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements and provides features that make the weighing process simple, fast and convenient. This scale is set up to determine the weight of a stationary patient.

Capacity and Resolution	Capacity: 440 lb / 200 kg / 31 st Resolution: 0.1 lb / 0.05 kg / 0.125 lb	
Environmental	Operating temperatures: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) Storage temperatures: 0°C to 50°C (32°F to 125°F) Atmospheric Pressure: 500hPa to 1060hPa Maximum Humidity: 85% RH in use or in storage	
Physical Dimensions	Platform Size: Width: 12 5/8" (321 mm) Depth: 12 5/8" (321 mm) Height: 1 7/8" (48 mm)	Product Footprint: Width: 12 5/8" (321 mm) Depth: 12 5/8" (321 mm) Height: 1 7/8" (48 mm) Weight: 4 lb (1.8 kg)

Certifications

 	<p>Pelstar, LLC has been officially certified as the manufacturer of Health o meter® Professional medical devices. The Pelstar, LLC quality assurance system covers the development, production, sales and service of medical scales and measuring systems.</p>
--	---

Customer Service Information

This scale is shipped assembled in one carton. Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact Customer Service.

For further information or telephone support, please contact Customer Service at:
 Telephone: 1 (800) 815-6615 Email: HomProCS@hom scales.com

SET-UP INSTRUCTIONS

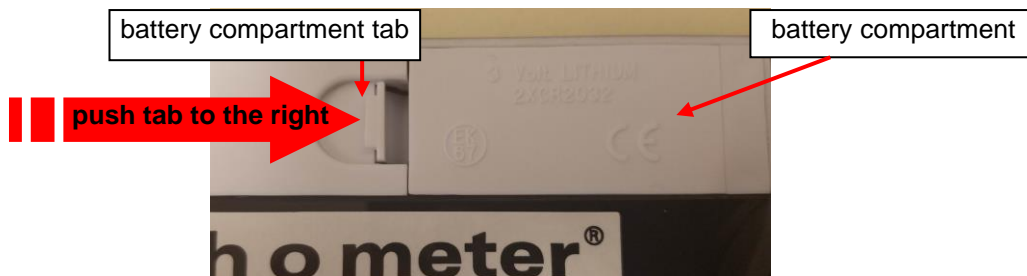
To avoid damaging the scale when unpacking it, **do not use a box cutter, knife, scissors or any sharp object to open the protective inner packaging.** Remove scale from the carton and unwrap packing material carefully, to prevent scratching the unit. Set the carton aside for storage.

Battery Instructions

The scale is shipped with batteries already installed. Before first use, you must remove the pull tab located within the battery compartment tab. The battery compartment is located on the underside of the scale. To replace the batteries, follow these steps.

1. To open the battery cover, push the battery compartment tab to the right and lift upwards.

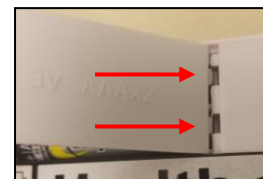
Note: You do NOT need to remove any screws to open the battery compartment.



2. To remove the batteries, press upward on the white tab that is holding the battery. Moving the tab will loosen the battery so it can be removed. Remove both batteries and replace with two new 3V Lithium (CR2032) batteries. Follow the battery illustration to ensure the batteries are inserted with the + side facing up.

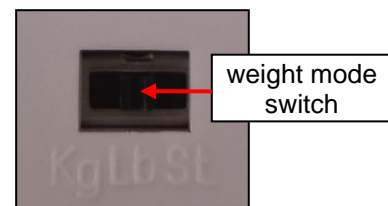


3. Replace the battery compartment cover by sliding the end of the cover into the battery compartment. Then push down on the tab and compartment to ensure the battery cover is firmly attached.



Selecting the Weight Mode (Kilograms/KG, Pounds/LB, or Stones/ST)

1. To select the weight mode, turn the scale over to access the weight mode switch.
2. Slide the switch to the desired weight mode.
3. The far left position is for Kilograms. Center position is for Pounds. The far right position is for Stones.



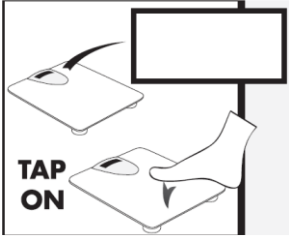
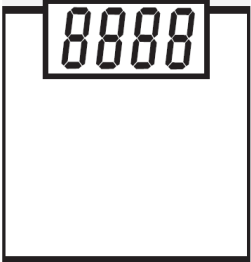
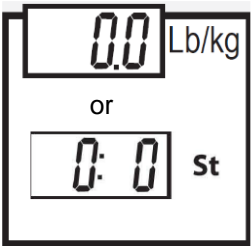
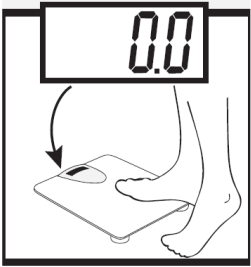
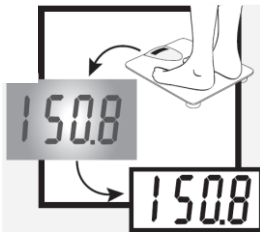
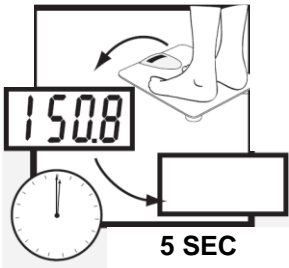
Connectivity Option

The 844KL-USB includes a USB port for connectivity to a PC or other device. To learn more about the connectivity options for this scale, please contact Health o meter[®] Professional Customer Service at 1-800-815-6615 or homprocs@homscales.com.



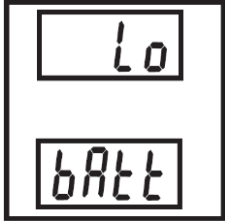
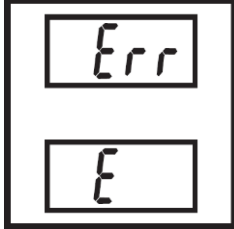
OPERATING INSTRUCTIONS

Measuring Weight

1. To turn on the scale, tap firmly with your foot on the center of the platform.	
2. Four digits will appear on the display.	
3. Wait for 0.0 to appear on the display.	
4. Step onto the scale. Stand still until weight appears.	
5. After the weight has locked, the measurement will flash on the display.	
6. Weight will remain displayed for 5 seconds after stepping off the scale.	

TROUBLESHOOTING / MAINTENANCE & CLEANING

Refer to the following instructions to check and correct any failure before contacting Customer Service.

If the display shows “Lo bAtt” message, replace batteries per the instructions on page 4.	 The image shows a digital display with two lines. The top line displays the text "Lo" and the bottom line displays the text "bAtt".
If the display shows “Err E” the load on the scale exceeds the capacity. 844KL Capacity: 440 lb / 200 kg / 31 st	 The image shows a digital display with two lines. The top line displays the text "Err" and the bottom line displays the text "E".

For further assistance please contact technical support toll free at 1 (800) 638-3722.

Maintenance

Caution: Before first use, or after long periods of non-use, check the scale for proper operation and function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service personnel.

1. Check overall appearance of the entire scale for any obvious damage, wear and tear.
2. Do not store near chemicals, heaters or radiators.
3. Do not drop, kick, or jump on the scale.
4. This scale is a sensitive weighing device. Do not store anything on top of the scale platform.
5. If your scale fails to work properly, do not attempt to dismantle it. This will void your warranty.

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

1. Health o meter® Professional recommends using a mild soap and water solution on a soft cloth or disposable wipe:
2. After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all scale parts are completely dry after cleaning.
3. Never use rough or abrasive materials to clean the scale, as these will damage the scale's finish.
4. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
5. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

WARRANTY

1-Year Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional product is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of one (1) year. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and properly packed to Pelstar, LLC (see "To Get Warranty Service", below, for instructions). If the manufacturer determines that a defect of material or in workmanship exists, the customer's sole remedy will be replacement of the scale at no charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1) 800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC
Attention R/A# _____
Return Department
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525



9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:

www.homscales.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license.

Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar, LLC.

We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar, LLC 2021

Health o meter[®]
P r o f e s s i o n a l

Modelo 844KL / 844KL-USB Báscula Digital de Piso



ISO 9001:2015
CERTIFIED

ISO13485:2016
CERTIFIED

Instrucciones del Usuario



PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
www.homscales.com

weigh**easier**[®]

Gracias por su compra de este producto Health o meter® Professional. Lea por favor este manual cuidadosamente, y consérvelo para pronta referencia o capacitación.

TABLA DE CONTENIDOS

Precauciones y Advertencias	3
Especificaciones	3
Certificaciones	3
Servicio	3
Instrucciones de Configuración	4
Instrucciones de Operación.....	5
Resolución de Problemas	6
Mantenimiento y Limpieza.....	6
Garantía	7

Nota: Esta báscula ha sido calibrada de fábrica y no puede ser calibrada por el usuario.

Por favor registre su báscula para cobertura de garantía en:

www.homscales.com

Para Instrucciones del Usuario, actualizaciones y revisiones, ingrese a:

www.homscales.com

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS / ESPECIFICACIONES / CERTIFICACIONES / SERVICIO

Precauciones y Advertencias

Para prevenir lesiones y daño a su báscula, por favor siga estas instrucciones muy cuidadosamente.

- No transporte la báscula con objeto alguno sobre la plataforma.
- Para pesajes exactos, se debe colocar la báscula sobre una superficie plana y estable.
- Para pesajes exactos, verifique antes de cada uso el funcionamiento apropiado según el procedimiento descrito en este manual.
- No se utilice en presencia de materiales inflamables.



En ningún caso Pelstar, LLC será responsable por daños o lesiones causados por, o en relación a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.

Especificaciones

Esta escala digital de piso exhibe el peso en libras, kilogramos o stones (piedras). También ofrece un bloqueo del peso que permite que la medición permanezca mostrada por 5 segundos luego de bajar de la báscula. Cada báscula de precisión se diseña para proporcionar mediciones de peso exactas, confiables y repetibles y características que hacen el proceso de pesaje simple, rápido y conveniente. Esta báscula está configurada para determinar el peso de un paciente estacionario.

Capacidad y Resolución	Capacidad: 440 lb / 200 kg / 31 st Resolución: 0.1 lb / 0.05 kg / 0.125 lb	
Entorno	Temperaturas de funcionamiento: 10°C a 35°C (50°F a 95°F) Temperaturas de Almacenamiento: 0°C a 50°C (32°F a 125°F) Presión Atmosférica: 500hPa a 1060hPa Humedad Máxima: 85% de HR en uso o almacenada	
Dimensiones Físicas	Tamaño de la Plataforma Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Altura: 1 7/8" (48 mm)	Area Ocupada por el Producto: Ancho: 12 5/8" (321 mm) Largo: 12 5/8" (321 mm) Altura: 1 7/8" (48 mm) Peso: 4 lb (1.8 kg)

Certificaciones

 	<p>Pelstar, LLC se ha certificado oficialmente como el fabricante de los dispositivos médicos Health o meter® Professional. El sistema de aseguramiento de calidad de Pelstar LLC cubre el desarrollo, producción, ventas y servicio de básculas médicas y sistemas de medición.</p>
--	--

Información de Servicio al Cliente

Esta báscula se envía ensamblada en un embalaje. Examine cuidadosamente el embalaje en busca de daño en el envío antes de desempacar. Si se detecta algún daño, contacte a Servicio al Cliente.

Para ayuda adicional o soporte telefónico, por favor contacte a Servicio al Cliente:

Teléfono: 1 (800) 815-6615 Email: HomProCS@homsscales.com

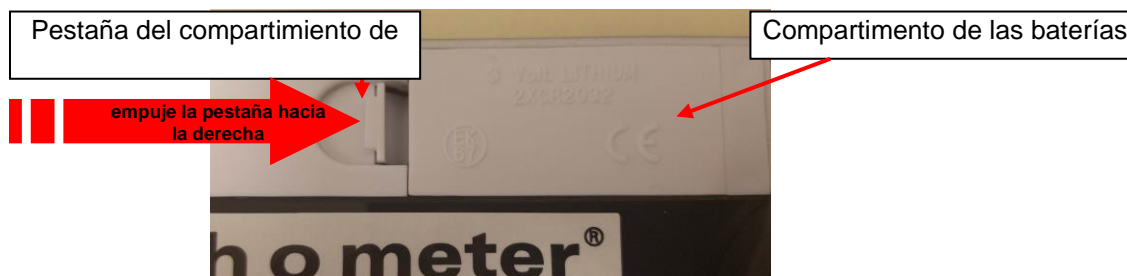
INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

A fin de evitar daños en la báscula cuando la desempaque, **no use una navaja para cortar cartón, cuchillo o tijeras o cualquier objeto afilado para abrir el empaque protector interno**. Retire la báscula del embalaje y desempaque cuidadosamente, a fin de prevenir rayones en la unidad. Ponga aparte la caja para su almacenamiento.

Instrucciones para las Baterías

La báscula se envía con las baterías ya instaladas. Previo al primer uso, se debe retirar la pestaña de sujeción ubicada en la pestaña del compartimiento de la batería. El compartimiento de baterías está situado en la parte de abajo de la báscula. Para reemplazar las baterías, siga estos pasos.

1. Para abrir la cubierta de las baterías, empuje la pestaña del compartimiento hacia la derecha y tire hacia arriba. **Nota:** Usted NO necesita retirar ningún tornillo para abrir el compartimiento de las baterías.



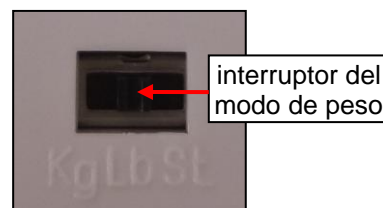
2. Para retirar las baterías, presione hacia arriba sobre la pestaña blanca que sostiene la batería. Al mover la pestaña se aflojará la batería para que pueda ser removida. Retire ambas baterías y sustitúyalas por dos baterías nuevas de Litio de 3V (CR2032). Siga la ilustración de las baterías para asegurarse de que están insertadas con el lado + hacia arriba.



3. Coloque nuevamente la cubierta del compartimiento deslizando el extremo de la cubierta dentro del compartimiento. Luego presione la pestaña en el compartimiento para asegurar la posición de la cubierta.

Seleccionar el Modo de Peso (Kilogramos/KG o Libras/LB), o Stones/ST)

1. Para seleccionar el modo de peso, dé la vuelta a la báscula para acceder al interruptor de modo de peso.
2. Deslice el interruptor hacia el modo de peso deseado.
3. La primera posición de la izquierda es para Kilogramos. La posición central es para Libras. La posición de la derecha es para Stones.



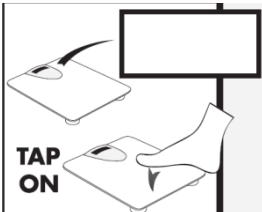
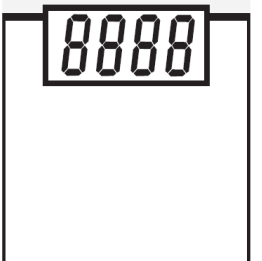
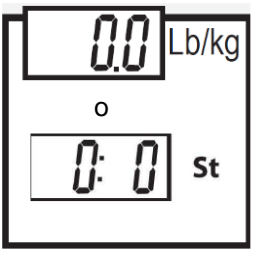
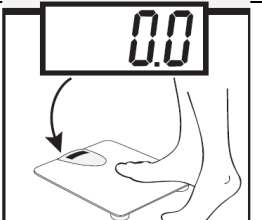
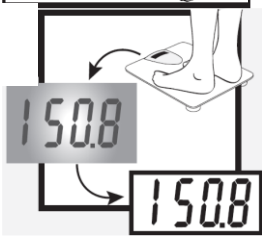
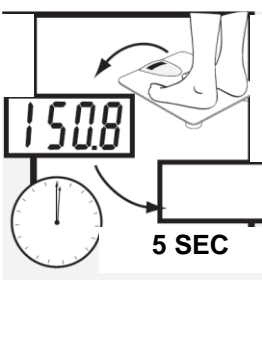
Opción de Conectividad del Modelo 844KL

El modelo 844KL incluye un puerto USB para conectividad con una PC u otro dispositivo. Para aprender más sobre las opciones de conectividad de esta báscula, por favor contacte a Health o meter® Professional Servicios al Cliente al 1-800-815-6615 o visite homprocs@homscscales.com.



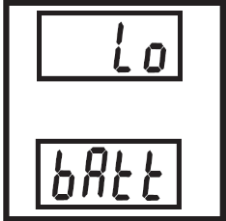
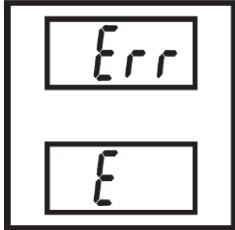
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Medición del Peso

<p>1. Para encender la báscula, golpee suave pero firmemente con su pie en el centro de la plataforma.</p>	
<p>2. Cuatro dígitos aparecerán en la pantalla.</p>	
<p>3. Espere a que 0.0 aparezca en la pantalla.</p>	
<p>4. Suba a la báscula. Permanezca quieto hasta que aparezca el peso.</p>	
<p>5. Después de que el peso se haya fijado, la medición destellará en la pantalla.</p>	
<p>6. El peso seguirá mostrado por 5 segundos luego de bajar de la báscula.</p>	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS / MANTENIMIENTO & LIMPIEZA

Consulte las instrucciones siguientes para comprobar y corregir cualquier falla antes de entrar en contacto con Servicio al Cliente.

<p>Si la pantalla muestra el mensaje de “Lo bAtt”, substituya las baterías según las instrucciones en la página 4.</p>	
<p>Si la pantalla muestra “Err E”, la carga sobre la báscula excede la capacidad. 440 lb / 200 kg / 31 st</p>	

Para ayuda adicional, por favor contacte a soporte técnico sin costo al 1 (800) 638-3722.

Mantenimiento

Precaución: Antes del primer uso, o después de períodos largos de falta de uso, revise la operación y funciones apropiadas de la báscula. Si la báscula no funciona correctamente, consulte al personal de servicio calificado.

1. Compruebe el aspecto general de toda la báscula para saber si hay daño o desgaste por uso obvios.
2. No la almacene cerca de productos químicos, calefacciones o radiadores.
3. No caiga, no golpee con el pie, ni salte sobre la báscula.
4. Esta báscula es un dispositivo de pesado extremadamente sensible. No almacene objeto alguno encima de la plataforma de la báscula.
5. Si su báscula deja de funcionar correctamente, no intente desarmarla. Esto anulará su garantía.

Limpieza y Desinfección

El cuidado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto y efectivo.

1. Health o meter® Professional recomienda usar una solución suave de detergente sobre un paño suave o toallita desechable:
2. Después de la limpieza/desinfección, pase un paño humedecido con agua y luego un paño limpio y seco. Para evitar la acumulación de residuos o superficies mojadas, asegúrese de que todos los componentes de la báscula están completamente secos luego de la limpieza.
3. Nunca utilice materiales ásperos o abrasivos para limpiar la báscula, ya que éstos arruinan el acabado de la misma.
4. No sumerja la báscula en agua o en ningún otro líquido.
5. No vierta ni atomice líquidos directamente sobre la báscula.

GARANTÍA

Garantía Limitada de 1 Año

¿Qué Cubre la Garantía?

Este producto Health o meter® Professional está garantizado desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de fabricación por un periodo de un (1) año. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-pagado y apropiadamente empacado a Pelstar, LLC (vea la sección "Obtener Servicio de Garantía", abajo, para obtener instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricación, el único recurso del cliente será el reemplazo de la báscula sin costo alguno. El reemplazo será hecho con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si el producto no está disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren sólo por el periodo de garantía original.

¿Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantía. Por favor guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

¿Qué Se Excluye?

Su garantía no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones: uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de operación, abuso incluyendo manipulación, daño en el transporte, o la reparación o alteraciones no autorizadas. Además, la garantía no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de país a país, de estado a estado, de provincia a provincia o de jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener Servicio de Garantía, asegúrese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra. Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un número de autorización de devolución (RA), lo cual debe incluirse en la etiqueta de devolución. Incluya su comprobante de compra al producto defectuoso junto con su nombre, dirección, número telefónico durante el día y la descripción del problema. Empaquete cuidadosamente el producto y envíelo con el envío y el seguro prepagados a:

Pelstar, LLC
Attention (Atención) #R/A _____
Return Department (Departamento de Devoluciones)
9500 West 55th Street
McCook, IL 60525



PELSTAR, LLC

9500 West 55th Street • McCook, IL 60525 • USA

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

POR FAVOR REGISTRE SU BÁSCULA PARA COBERTURA DE GARANTÍA EN:

www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia.

Los productos Health o meter® Professional son fabricados, diseñados, y de propiedad de Pelstar, LLC.

Nos reservamos el derecho de mejorar, realzar, o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2019