

LA 2210KL-AM

BÁSCULA PEDIÁTRICA/NEONATAL DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN ANTIMICROBIANA

La báscula neonatal 2210KL-AM fue diseñada para usarse en unidades de cuidados intensivos neonatales, salas de recién nacidos, salas de parto y en la práctica de la pediatría, en donde un alto nivel de precisión es necesario para pesar a los pacientes más pequeños. La báscula brinda a los médicos y a los pacientes seguridad con su cuerpo, bandeja, asas y teclado antimicrobianos. La bandeja desmontable con bordes redondeados cuenta con un sistema de montaje con patente pendiente que elimina el riesgo de rompimiento, haciendo que sea fácil de limpiar. La cinta métrica integrada permite que los usuarios midan peso y altura de forma simultánea. La báscula fijará un peso de forma rápida a pesar del movimiento del bebé. La pantalla retroiluminada hace que sea más fácil leer el peso del paciente desde casi cualquier ángulo y condición de luz.

La báscula con una alta resolución de 1 gramo cuenta con capacidad de 20,000 gramos/20 kg/45lb. La interfaz digital fácil de usar de la 2210KL-AM incluye funciones de ingesta de leche materna, retención automático de peso, retención/liberación, cero, tara, pretara, volver a pesar, memoria, conversión entre y fijación de GM/KG/LB, cero automático y apagado automático. La detección de movimiento de la báscula le brinda la habilidad de pesar de forma precisa a pesar del movimiento del paciente. La exclusiva función Everlock® permite la fijación permanente de una unidad de peso (LB, KG, o G) en la báscula.

2210KL4-AM


Báscula con opción de
bandeja de 4 lados

La báscula proporciona una integración fácil y comunicación fluida con las aplicaciones de RME actuales. La 2210KL-AM incluye una interfaz USB para permitir la conectividad con una computadora, software de RME u otros dispositivos electrónicos por medio de varias Soluciones de Conectividad de Health o meter® Professional. Existen modelos con opciones como solo kilogramos, solo gramos y conectividad inalámbrica integrada.

Health o meter®

Professional

Health o meter® Professional 2210KL-AM

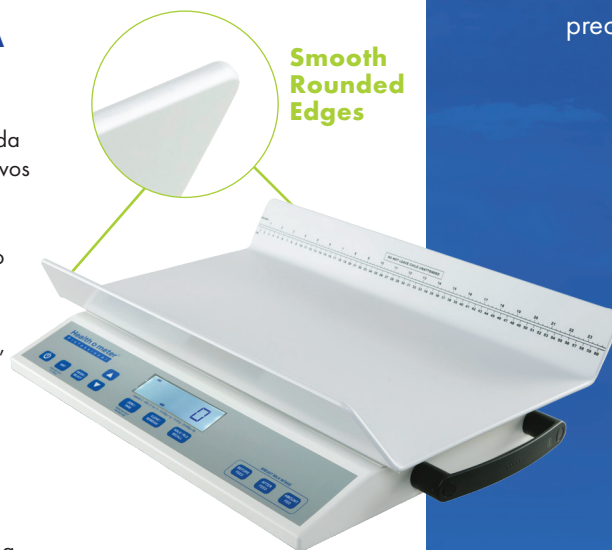

HAY FUERZA EN NUESTROS NÚMEROS.

Al sumar los números de nuestra báscula, no es de sorprender que la 2210KL-AM sea su elección por su precisión y confiabilidad.

RESOLUCIÓN
DE 1 GRAMO

120+ ESPECIALISTAS EN
EL CAMPO LOCALES

100%
DE CONECTIVIDAD

LA MARCA #1
EN CONFIANZA

100 AÑOS
DE SERVICIO

weigh**easier**®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad

45 lb / 20 kg / 20,000 gm

Resolución

1 g (a 10,000 g);

5 g (10,001 a 20,000 g)

Conectividad RME

Vía USB, tecnología inalámbrica Pelstar® opcional

Pantalla LCD con iluminación trasera

5 1/4" x 1 3/8" (133 mm x 35 mm)

4 niveles de intensidad

Baterías

6 baterías D incluidas,
adaptador ADPT30 incluido

Funciones

Conversión entre LB / KG / GM

Fijación de LB / KG / GM

Cero

Tara

Pretara

Volver a pesar

Memoria

Cero automático

Apagado automático

Detección de movimiento

Everlock®

Retención / liberación

Retención automático de peso por 30 a 60 segundos

Ingesta de leche materna

Tamaño de la bandeja

(largo x ancho x alto)

(2210KL-AM) 25 1/2" x 15 3/4" x 3 3/4"

(645mm x 403mm x 95mm)

(2210KL4-AM) 27 1/2" x 15 3/4" x 3 3/4"

(700 mm x 405 mm x 95 mm)

Dimensiones del producto

(2210KL-AM) 25 1/2" x 18 1/4" x 6 1/2"

(645mm x 460mm x 160mm)

(2210KL4-AM) 27 1/2" x 18 1/4" x 6 1/2"

(700 mm x 460mm x 160mm)

Peso del producto

(2210KL-AM) 28 lb / 13 kg

(2210KL4-AM) 29 lb / 13.5 kg

Cinta métrica

0" - 24" / 0 cm - 60 cm

Portabilidad

Asas de uso rudo para facilidad de movimiento del carrito opcional 2210CART

Garantía

2 años de garantía limitada con el fabricante

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
2210KL-AM	Báscula pediátrica / neonatal digital de alta resolución antimicrobiana, LB y KG
2210KG-AM	Báscula pediátrica / neonatal digital de alta resolución antimicrobiana, solo KG
2210KL-AM-BT	2210KL-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2210KG-AM-BT	2210KG-AM con tecnología inalámbrica Pelstar® integrada
2210KL4-AM	Báscula pediátrica / neonatal digital de alta resolución antimicrobiana con bandeja de 4 lados, LB y KG
2210KG4-AM	Báscula pediátrica / neonatal digital de alta resolución antimicrobiana con bandeja de 4 lados, solo KG
2210CART	Carrito opcional para la serie 2210
SS-2210KL	Garantía extendida de 2 años ScaleSurance® para la serie 2210*
ADPT30	Adaptador incluido, No. de artículo para refacción o reemplazo
PLUGSET30	Adaptadores para usar la báscula fuera de Norteamérica
PELSTARONE-P	Wireless thermal printer



Carrito opcional
2210CART

Para conocer más, llame al número
1-800-815-6615 o visite **homscales.com**

Health o meter®
P r o f e s s i o n a l

*No disponible en todos los países.